



# お肌さらさらシート

紙おむつ内部に嵩高不織布を使用することで従来品よりも**ウェットバック**を大幅に改善!!

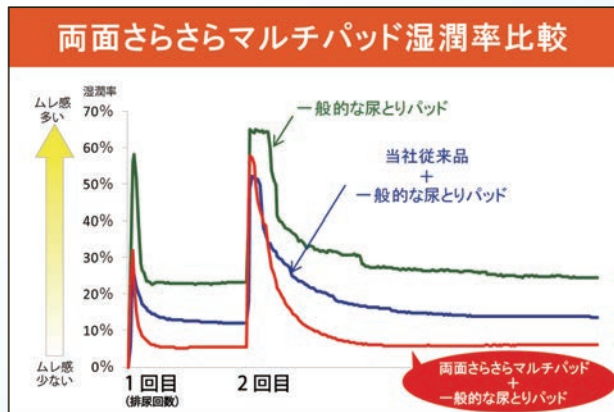

尿を素早く下の吸収体に落とし込み、肌をさらさらに保ちます。夏場の湿気が多い季節や、お肌の弱い方にも安心してご使用できます。

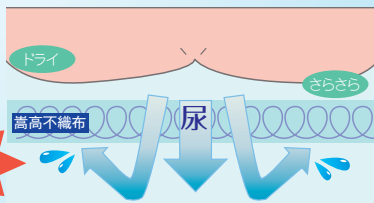


仙骨部分に集中しがちな**体圧を分散**(拡散)させることが、可能になりました!!

体圧分散実験 60代男性  
仰臥位にて、赤線内の体圧分布を測定した。



紙おむつ装着なし

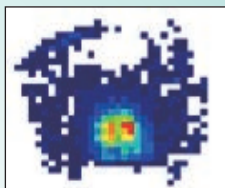


テープ止め+ビッグパッド



テープ止め+ビッグパッド+  
両面さらさらマルチパッド

仙骨部分に体圧が**集中**

仙骨部分の体圧が**分散**

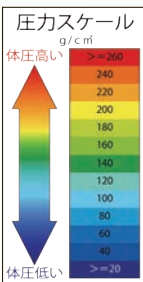


仰臥位時での体圧分散では、両面さらさらマルチパッドを1枚併用すると、仙骨部分1カ所に集中していた体圧を分散させることができます。

# 体圧分散用クッション

# 水様便対応パッド

紙おむつ表面に便固形物が目詰まりしにくい素材を採用、便中に含まれる**固形物を濾過**!!

加圧吸収実験(疑似便200cc注入) 60秒後

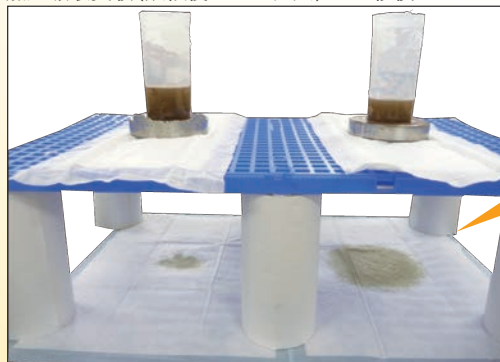

固形物を濾過し、便中に含まれる水分を通過させている。

当社従来品

両面さらさらマルチパッド

便モレでお困りの方に、両面さらさらマルチパッドをパッドの上に敷くことで、水様便を濾過し、下のパッドに尿や便中の水分を吸収させることができます。




水様便パッドに早変わり!!

★効果には個人差があり、便の量や形状によっては対応できない場合があります。

# 4つのマルチな特徴

スリム吸収シート採用で当社従来品よりおむつの厚みが**35%ダウン**!!

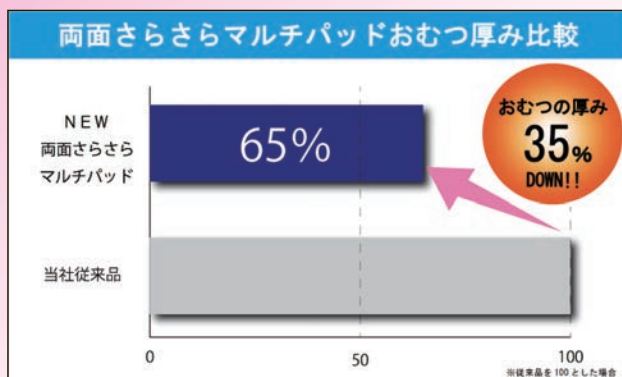

足回りや腰回りのすき間にパッドを併用しやすくなります。また、背モレ対策や臀部のスキンケア対策として、紙おむつ内部にパッドを折り畳んで併用する場合も違和感なくご使用できます。

# スリム吸収シート